

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

10

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
22. August 2002 (22.08.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 02/064069 A2

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: A61F 7/00

(74) Anwalt: GOROLL, Peter; Lessingstrasse 1, 65189 Wiesbaden (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/15333

(22) Internationales Anmeldedatum:  
27. Dezember 2001 (27.12.2001)

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AU, BG, BR, CA, CN, CU, CZ, EE, FI, HU, IL, JP, KR, LV, MK, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, US, YU.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
100 65 592.0 28. Dezember 2000 (28.12.2000) DE

Veröffentlicht:

(71) Anmelder und  
(72) Erfinder: SINNIG, Werner [DE/DE]; Schwenckestrasse 55, 20255 Hamburg (DE).

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): GOROLL, Peter [DE/DE]; Nonnenwaldweg 36, 65388 Schlangenbad (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: HEAT/COLD TREATMENT AND DEVICES USED IN PAIN TREATMENT ESPECIALLY OF ACUTE TENSION HEADACHE AND MIGRAINE

(54) Bezeichnung: WÄRME-KÄLTE-VERFAHREN UND GERÄTE ZUR SCHMERZBEHANDLUNG INSBESONDERE VON AKUTEM SPANNUNGSKOPFSCHMERZ UND MIGRÄNE

(57) Abstract: The invention relates to a heat/cold treatment and to devices used in pain treatment especially of acute tension headache and migraine which is based on the effect of the alternate application from the exterior to arterial and venous vessels of heat and cold for different intervals (seconds or minutes). The treatment dissolves the congestion in the blood vessels, the painful region is supplied with blood and the respective nerve tracts, synapses and conduction fibers are influenced in a pain-relieving manner. To this end, the housing or bands are provided with cooling and heating units/elements and cold/heat is supplied by feeding power or cold or hot water or corresponding coolants (oils) while providing a humid milieu which may contain a medicament.

(57) Zusammenfassung: Das Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne wirkt durch Einwirkung von Wärme und Kälte im Wechsel von unterschiedlicher Zeitdauer in Sekunden oder Minuten auf arterielle und venöse Gefäße von aussen. Dies bewirkt eine Auflösung der Stauung der Blutgefäße, das Schmerzgebiet wird mit Blut versorgt und die jeweils zuständigen Nervenbahnen, Synapsen und Reizleiter werden schmerzlindernd beeinflusst, indem man Gehäuse oder Bänder mit Kühl- und Heizaggregaten/Elementen versieht und über Stromzufuhr oder kaltem oder heissem Wasserzufluss oder entsprechende Kühlflüssigkeiten (Öle) versorgt unter medikamentöser Beigabe eines Feuchtigkeitsmilieus.

WO 02/064069 A2

---

## **Wärme-Kälte-Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne**

---

### **Beschreibung**

Bisher sind für die Behandlung von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne überwiegend medikamentöse Behandlungen bekannt.

Vorliegendes Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung basieren auf den Erkenntnissen bei den Symptomen (Fig. 1 u. 2) Spannungskopfschmerz, verschiedene Schmerzformen (Fig. 3. und 4.), im besonderen bei Migräne- und von Tinnitusbeschwerden (Fig. 1. und 2.) sowie vergleichbaren Beschwerden.

Bei dem Migräneschmerz und weiteren Kopfschmerzformen handelt es sich aus der Sicht der Erfinder um einen Gefäßverharrungszustand, welcher somit nicht der Kontraktion unterliegt und aufgrund der vorhandenen Erweiterung oder Verengung des Gefäßes zu einem Gefäßschmerz führt, der über die Nervenbahnen den Gehirnzellen mitgeteilt wird.

Erst wenn sich das Gefäßverhalten (Erweiterung oder Verengung) auflöst, läßt auch der Schmerz nach. Bekanntermaßen kann dieses Gefäßverhalten lange Zeit, sogar über mehrere Tage, anhalten und zu den bekannten unerträglichen Beschwerden des Patienten führen.

Bei dieser neuen Methode erreicht man durch äußere Einwirkung, dass sich der Gefäßverharrungszustand aufhebt. Es kommt zur Reorganisation des Gefäßablaufes in seiner ursprünglichen Elastizität und seines Kontraktionsvermögens.

Das nachfolgend näher beschriebene Verfahren und die Geräte (Fig. 1 - 4) dienen der Reduzierung bzw. Aufhebung von Schmerzen (Kopfschmerzen, Migräne u. ä./Beseitigung von Tinnitusbeschwerden sowie vergleichbaren Beschwerden).

Die Funktion basiert auf der Einwirkung von Wärme und Kälte im Wechsel von unterschiedlicher Zeitdauer in Sekunden oder Minuten auf arterielle und venöse Gefäße von außen. Dieser Wärme-Kältewechsel bewirkt eine Auflösung der Erstarrung der Blutgefäße, welche das jeweilige Schmerzgebiet mit Blut versorgen und die jeweils zuständigen Nervenbahnen, Synapsen und Reizleiter schmerzlindernd beeinflusst.

Durch die Wärme-Kältebehandlung wird die natürliche Flexibilität der o. a. Systeme gefördert und damit der Schmerz reduziert bzw. eliminiert.

Die Schmerzbehandlung durch vorliegende Geräte basiert auf der Wärme-Kältereizaktivierung.

Alle Formen der Kälte- und Wärmezuführung sind denkbar. Wärme- und Kälteplatten elektrisch betrieben, trockenes oder feuchtes Milieu, Feuchtigkeit oder trockene Tücher oder entsprechende Materialien aus Kunststoff, Stoff, Gummi.

Die Geräte (Fig. 1 - 4) sind einfach handhabbar und mit Kühl- und Heizaggregaten/Elementen versehen und wirken über Stromzufuhr oder kalten und heißen Wasserzufluss bzw. entsprechenden Kühlflüssigkeiten (wie z. B. Öle oder Festaggregate und vom Eiswürfel bis hin zu flüssigen Stickstoff).

Zusätzliche medikamentöse Beigaben (insbesondere homöopathische) können ergänzt werden, wie z. B. Feuchtigkeitsmilieu mit Johanniskrautverbindung oder ähnlichen gefäßentspannenden pflanzlichen Wirkstoffen.

Das vorliegende Prinzip Wärme- und Kältezufuhr wurde an mehreren Personen mit akuten Schmerzzuständen getestet. Die Erfolgsquote lag bei ca. 90%, wobei Spannungskopfschmerz, Migräne sowie akuter Kopfschmerz unterschiedliche Dauer der Wärme- und Kältezufuhr erfordern.

Beim Spannungskopfschmerz erweist sich eine gleiche Dauer von Wärme und Kälte an erfolgreichstem.

Bei Migräne wirkt eine längere Kältezufuhr gegenüber einer kürzeren Wärmezufuhr am effektivsten.

Die Entscheidung, welche individuellen Einstellungen/Frequenzen gewählt werden, lässt sich an den Sekundärsymptomen ableiten (wie z. B. Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Übelkeit, Druckempfindlichkeit und Wärme- Kälteempfindlichkeit).

Für die Behandlung der Migräne, dem Spannungskopfschmerz und Tinnitus wird ein Gerät (Fig. 1) ähnlich einem Kopfhörer (Fig. 1) (1) mit zwei Muscheln (Fig. 1) (2) verwendet. In den Muscheln (Fig. 1) (2) befinden sich die Wärme- (Fig. 1) (3) Kälteelemente (Fig. 1) (4), die durch eine entsprechende Vorrichtung (Fig. 1) (5) in Zeitintervallsteuerung entweder das Wärme- (Fig. 1) (3) oder das Kälteelement (Fig. 1) (4) im Wechsel der Haut aufbringen. Zwischen den Kälte- und Wärmeelementen und der Epidermis muß ein Feuchtigkeitspolster/Gewebe als Puffer vorhanden sein.

In dem Bügel des Kopfhörers (Fig. 1) (1) verlaufen elektrische Zuleitungen (Fig. 1) (6), die über Anschlußdrähte (Fig. 1) (7) mit dem Niederspannungs- oder Normalgerät (Fig. 1) (8) verbunden sind. Das Niederspannungs- oder Normalgerät (Fig. 1) (8) ist mit dem Ein- und Ausschalter (Fig. 1) (9) versehen sowie mit der Intervall- und Zeitsteuerung (Fig. 1) (10).

Bei dem Wärmeelement (Fig. 1) (3) respektive den Kälteplattenelemente (Fig. 1) (4) können Kühlrippensysteme (Fig. 1) (11) aus unterschiedlichen Materialien wie z. B. Aluminium, Messing, Keramik sowie anderen Metallen, die Wärme und Kälte ableiten Verwendung finden.

Durch Niederstromzuführung wird erhitzt oder gekühlt, um in dem beschriebenen Rhythmus über die Wechselelektromechanik (Fig. 1) (5) und die dazu-

gehörige Steuerelektronik (Fig. 1) (8) im Rahmen der notwendigen Intervalle zu der jeweils erforderlichen Schmerzbehandlung zu gelangen.

Die Wärme/Kälteelemente abschließende Platte/Folie (Fig. 1) (12) muß mit einem Feuchtigkeitsspender (Fig. 1) (13) versehen werden, um nicht epidermisch-physiologisch den Behandlungsbereich negativ zu beeinflussen (Feuchtigkeitsentzug der Epidermis).

Für die Behandlung der Migräne, dem Spannungskopfschmerz und Tinnitus wird ein Gerät (Fig. 1) ähnlich einem Kopfhörer (Fig. 1) (1) mit zwei Muscheln (Fig. 1) (2) verwendet. In den Muscheln (Fig. 1) (2) befinden sich die Wärme- (Fig. 1) (3) Kälteelemente (Fig. 1) (4) mit der Möglichkeit zur Flüssigkeitsaufnahme, die durch eine entsprechende Vorrichtung (Fig. 1) (5) in Zeitintervallsteuerung entweder des Wärme- (Fig. 1) (3) oder das Kälteelement (Fig. 1) (4) im Wechsel der Haut aufbringen. Die Zeitintervallsteuervorrichtung (Fig. 1) (5) ist über ein elektrisches Kabel (Fig. 1) (6) mit dem Niederspannungsgerät (Fig. 1) (7) mit dem Ein- und Ausschalter (Fig. 1) (8) versehen sowie mit der Intervallsteuerung (Fig. 1) (9).

Die Wärme- Kälteelemente (Fig. 2) (3 und 4) sind mit den jeweiligen Zuleitungen (Fig. 2) (10 und 11) verbunden. Die Zuleitungen (Fig. 2) (10 und 11) sind wiederum mit dem Wärme- Kälteflüssigkeitskasten (Fig. 2) (12) verbunden. In den Wärme- Kälteflüssigkeitskasten (Fig. 2) (12) ist die Pumpe (Fig. 2) (13) zur Flüssigkeitssteuerung integriert.

In dem Bügel (Fig. 2) (1) sind zwei Schläuche integriert von denen der eine (14) warme Flüssigkeit und die andere Leitung kalte Flüssigkeit (Fig. 2) (15) zu den jeweiligen Wärme- Kälteelementen (Fig. 2) (3 und 4) transportieren, so dass jeweils ein Wärme- und Kältekühlmittelkreislauf entsteht.

In den Kopfhörern (Fig. 2) (1) ist das Kabel (Fig. 2) (16) zur Steuerung der Zeitintervallsteuerungsvorrichtung (Fig. 2) (5) integriert.

Die Wärme- und Kälteelemente (Fig. 2) (3 und 4) müssen mit einem Feuchtigkeitsdepot (Fig. 2) (17) zur besseren Wärme- und Kälteübertragung auf die Haut versehen sein.

Weiterhin kann zuvor beschriebene Methode zur Behandlung von schmerzhaft gelenkentzündlichen Erkrankungen der Extremitäten in nachfolgender Abbildung eingesetzt werden.

Einem flexiblen Band (Fig. 3) (1) in unterschiedlicher Länge und Breite wird das hohle Kälte/ Wärmeelement (Fig. 3) (3) in eine Gehäuseflasche (Fig. 3) (3) eingefügt, so dass auf dem Band (Fig. 3) (1) diese in Abständen aufgereiht sind wie auf einer Perlenkette und durch das Steuerungselement (Fig. 3) (4) abwechselnd Kälte- und Wärmeflüssigkeit über die Schläuche (Fig. 3) (5 und 6) in Verbindung mit den Wärme- und Kältebecken (Fig. 3) (7 und 8) zu den Wärme/ Kälteelementen (Fig. 3) (2) transportiert. Das Wärme/ Kältebecken (Fig. 3) (7 und 8) eine Pumpe (Fig. 3) (9), die die Wärme- und Kühlflüssigkeit durch das Flüssigkeitssystem pumpt.

Das elektrische Steuerungselement (Fig. 3) (4) ist mit der Pumpe (Fig. 3) (9) mittels des Elektrokabels (Fig. 3) (10) verbunden und wird über den Ein- und Ausschalter (Fig. 3) (11) und die Intervallsteuerung (Fig. 3) (12) sowie unterschiedlichen Zeiteinheiten für warm und kalt geregelt.

Zwischen den Wärme/ und Kälteelementen (Fig. 2) (2) befinden sich die flüssigkeitsführenden Schläuche (Fig. 3) (13 und 14).

Die Wärme- Kälteelemente (Fig. 3) (2) sind jeweils mit einem Feuchtigkeitsspender (Fig. 3) (15) versehen der die Aufgabe hat, die Wärme oder die Kälte aufgrund des Feuchtigkeitmilien schneller in die Haut respektive tieferen Schichten zu bringen.

Das Wärme- Kälteband (Fig. 3) (1) wird durch einen entsprechenden Verschluß Klettverschluß (Fig. 3) (16) verschlossen und geöffnet.

Ebenfalls zur Behandlung der unterschiedlichen Schmerzzustände des Körpers wie z. B. der Extremitäten eignet sich das Wärme- Kältegerät in nachfolgender Ausbildung:

Einem flexiblen Band (Fig. 4) (1) in unterschiedlicher Länge und Breite werden die Kälte- (Fig. 4) (2) und Wärmeelemente (Fig. 4) (3) eingefügt, so dass auf dem Band (Fig. 4) (1) diese in Abständen aufgereiht sind wie auf einer Perlenkette und durch das Steuerungselement (Fig. 4) (4) abwechselnd Wärme- und Kälte erzeugt. Die Kalte- (Fig. 4) (2) und Wärmeelemente (Fig. 4) (3) sind jeweils in das Schutzgehäuse (Fig. 4) (14) eingebracht.

Das Niedersteuerungsspannungsgerät (Fig. 4) (4) ist mit einem Ein- und Ausschalter (Fig. 4) (5) und der Intervallsteuerung (Fig. 4) (6) für die Wärme- und Kälte versehen.

Das Niedersteuerungselement (Fig. 4) (4) ist mit einem Elektrokabel (Fig. 4) (7) mit dem zu den Wärme- Kälteelementen (Fig. 4) (2 und 3) führenden Kabel (Fig. 4) (8) verbunden.



Hinter den beiden Wärme- und Kälteelementen (Fig. 4) (2 und 3) befindet sich die wechselelektromechanische Steuerung (Fig. 4) (9) zum rhythmischen Wechsel der Wärme- Kälteelemente (Fig. 4) (2 und 3).

Den Wärme- Kälteelementen (Fig. 4) (2 und 3) sind die Kühlrippen (Fig. 4) (10) vorgelagert.

Die Wärme- Kälteelemente (Fig. 4) (2 und 3) werden durch das Element (Verschlußdeckel/Folie) (Fig. 4) (11) abgeschlossen.

Dem Verschlußelement (Fig. 4) (11) ist der Feuchtigkeitsspender (Fig. 4) (12) aufgebracht, um die Wärme- oder Kälte schneller in die Haut und die darunterliegenden Regionen eindringen zu lassen.

Das Wärme- Kälteband (Fig. 4) (1) ist an seinen Enden mit einem Klettverschluß (Fig. 4) (13) versehen, der das Wärme- Kälteband schließt oder öffnet.

Die Verwendung des Wärme- Kältebandes richtet sich nach der Grunderkrankung. Das jeweilige zu verwendende Wärme- Kälteband (Fig. 4) (1) wird somit entsprechend dem Schmerzzustand für den jeweiligen Körperteil ausgesucht und verwendet.

Für die Behandlung der Migräne, dem Spannungskopfschmerz und Tinnitus eignet sich auch das Gerät (Fig. 5) ähnlich einem Kophörer (Fig. 5) (1) mit zwei Muscheln (Fig. 5) (2). An resp. in den Muscheln (Fig. 5) (2) befinden sich die Wärmetauscher (Fig. 5) (4). Mit den Wärmetauschern sind die Wär-

me-Kälte Peltier-Elemente (Fig. 5) (3) vorgeschaltet, so dass dann, wenn das Peltier-Element (Fig. 5) (3) Kälte erzeugt und dadurch große Wärme abgibt, diese Wärme über den Wärmetauscher (Fig. 5) (4) abgibt.

Die entstehende Wärme des zuvor angesprochenen Vorganges wird durch die Kühlwasser Zu- und Ableitungen (Fig. 5) (7 und 8) verbunden mit dem Kühlwasserbehälter mit Kühlwasser (Fig. 5) (5) mittels der Pumpe (Fig. 5) (6) zirkulierend abtransportiert. Es findet daher über dieses zirkulierende Flüssigkeitssystem ein Wärmeaustausch statt der das Peltier-Element (Fig. 5) (3) vor Überhitzung schützt.

Mittels des Steuerungsgerätes für die Pumpe der Intervall- und Zeitsteuerung für die Peltier-Elemente (Fig. 5) (9) werden die Peltier-Elemente gesteuert, d. h. über welchen Zeitraum sie Kälte oder Wärme im Intervall abzugeben haben.

Das Steuerungsgerät für die Pumpe und die Intervall- und Zeitsteuerung für die Peltier-Elemente ist mit den Anschlußdrähten (Fig. 5) (13) verbunden.

Das Steuerungselement (Fig. 5) (9) ist mit dem Ein- und Ausschalter (Fig. 5) (10) versehen.

Um die menschliche Haut zu schützen ist das Wärme-Kälte Peltier-Element (Fig. 5) (3) mit einer abschließenden Platte/ Folie (Fig. 5) (11) versehen.

Damit die Wärme als auch die Kälte welches das Peltier-Element (Fig. 5) (3) abgibt der aufgebrachten Hautregion die entsprechende Intensität und Unmittelbarkeit der Kälte und Wärme zuführt, ist das Peliter-Element (Fig. 5) (3) versehen mit der abschließenden Platte/ Folie (Fig. 5) (11) mit einem Feuchtpender (Fig. 5) (12) verbunden. Dem Feuchtpender können zusätzliche Medikamentöse Beigaben (insbesondere homöopathische) eingebracht werden, wie z. B. ein Feuchtigkeitsmilieu mit Johanniskrautverbindungen o. ä. gefäßentspannenden pflanzlichen Wirkstoffen.

Mit vorliegender Erfindung können somit ohne herkömmliche pharmakologische Belastungen die beschriebenen Schmerzzustände gelindert und zumeist ganz behoben werden. Gefäßschwäche wie z. B. bei Migräne werden bei sachgemäßem Einsatz der Erfindung schon nach kurzer Zeit in den meisten Fällen völlig behoben.

---

**Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von  
akutem Spannungskopfschmerz und Migräne**

---

**Ansprüche**

1. Wärme-Kälte Verfahren und - Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t , d a s s durch Einwirkung von Wärme und Kälte im Wechsel von unterschiedlicher Zeitdauer in Sekunden oder Minuten auf arterielle und venöse Gefäße von außen eine Auflösung der Erstarrung der Blutgefäße erfolgt, das Schmerzgebiet mit Blut versorgt und die jeweils zuständigen Nervenbahnen, Synapsen und Reizleiter schmerzlindernd beeinflusst, in dem man Gehäuse oder Bänder (Fig. 1-5) mit Kühl- und Heizaggregaten /Elementen versieht und über Stromzufuhr oder kalten und heißen Wasserzufluss oder entsprechenden Kühlflüssigkeiten (Öle) versorgt unter medikamentöser Beigabe mittels eines Feuchtigkeitsmilieus.

2. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach Anspruch 1 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s ein Kopfbügel (Fig. 1) (1) versehen mit zwei Muscheln (Fig. 1) (2) verwendet wird.
3. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1 und 2 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s sich in den beiden Muscheln (Fig. 1) (2) Wärme- (Fig. 1) (3) Kälteelemente (Fig. 1) (4) befinden, die durch die Zeitintervallsteuerungsvorrichtung (Fig. 1) (5) entweder das Wärme- (Fig. 1) (3) oder das Kälteelement (Fig. 1) (4) der zur behandelnden Hautfläche aufbringt.
4. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1 bis 3 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s in dem Bügel des Kopfhörers (Fig. 1) (1) elektrische Zuleitungen (Fig. 1) (6) verlaufen und über die Anschlussdrähte (Fig. 1) (7) mit dem Niederspannungsgerät (Fig. 1) (8) verbunden sind, wobei das Niederspannungsgerät (Fig. 1) (8) mit einem Ein- und Aus- schalter (Fig. 1) (9) und der Intervallsteuerung (Fig. 1) (10) versehen ist.
5. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1 bis 4 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s dem Wärmeelement (Fig. 1) (3) und dem Kälteplattenelement (Fig. 1) (4) Kühlrippensysteme (Fig. 1) (11) aus Aluminium, Messing, sowie Flüssigkeitsdepots vorgeschaltet sind.
6. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1 bis 5 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Wärme- Kälteelemente (Fig. 1) (3 und 4) mit einer abschließenden Platte /Folie (Fig. 1) (12), sowie dem Feuchtigkeitsspender (Fig. 1) (13) versehen sind.

7. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach Anspruch 1 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s ein Kopfhörer (Fig. 2) (1) mit zwei Muscheln (Fig. 2) (2) verwendet wird, wobei in den Muscheln (Fig. 2) (2) die Wärme (Fig. 2) (3) und Kälteelemente (Fig. 2) (4) zur Flüssigkeitsaufnahme integriert sind.
8. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1 und 7 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Vorrichtung (Fig. 2) (5) mit einer Zeitintervallsteuerung das Wärme- (Fig. 2) (3) oder Kälteelement (Fig. 2) (4) im Wechsel der Haut aufbringt und die Zeitintervallsteuerung (Fig. 2) (5) über ein elektrisches Kabel (Fig. 2) (6) mit dem Niederspannungsgerät (Fig. 2) (7) versehen mit dem Ein- und Ausschalter (Fig. 2) (8) und der Intervallsteuerung (Fig. 2) (9) verbunden ist.
9. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1,7 und 8 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Wärme-Kälteelemente (Fig. 2) (3 und 4) mit den Zuleitungen (Fig. 2) (10 und 11) verbunden und diese wiederum mit dem Wärme-Kälteflüssigkeitskasten (Fig. 2) (12) verbunden sind wobei in den Wärme-Kälteflüssigkeitskasten (Fig. 2) (12) die Pumpe (Fig. 2) (13) integriert ist.
10. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1,7,8 und 9 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s der Bügel (Fig. 2) (1) mit zwei Schläuchen (Fig. 2) (14 und 15) versehen und das Kabel (Fig. 2) (16) integriert ist.
11. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1,7, 8,9 und

- 10 dadurch gekennzeichnet, dass die Wärme- und Kälteelemente (Fig. 2) (3 und 4) mit einem Feuchtigkeitsdepot (Fig. 2) (17) ausgestattet sind.
12. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass in ein flexibles Band (Fig. 3) (1) hohle Kälte- und Wärmeelemente (Fig. 3) (2) in eine Gehäusetasche (Fig. 3) (3) eingefügt sind.
13. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1 und 12 dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerungselement (Fig. 3) (4) verbunden mit den Schläuchen (Fig. 3) (5 und 6), diese wiederum verbunden mit den Wärme- und Kältebecken (Fig. 3) (7 und 8), die Kälte- und Wärmeflüssigkeit zu dem Wärme-Kälteelement (Fig. 3) (2) im Wechsel transportiert.
14. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1, 12 und 13 dadurch gekennzeichnet, dass dem Wärme- und Kältebecken (Fig. 3) (7 und 8) eine Pumpe (Fig. 3) (9) eingebracht ist.
15. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1, 12, 13 und 14 dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische Steuerungselement (Fig. 3) (4) mit der Pumpe (Fig. 3) (9) und dem Elektrokabel (Fig. 3) (10) verbunden ist und über den Ein- und Ausschalter (Fig. 3) (11) die Intervallsteuerung (Fig. 3) (12) regelt.
16. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1, 12, 13, 14

und 15 dadurch gekennzeichnet, dass die Wärme- Kälteelemente (Fig. 3) (2) mit den Schläuchen (Fig. 3) (13 und 14) verbunden sind.

17. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1,12 bis 16 dadurch gekennzeichnet, dass die Wärme- Kälteelemente (Fig. 3) (2) mit einem Feuchtigkeitsspender (Fig. 3) (15) versehen sind.
18. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1,12 bis 17 dadurch gekennzeichnet, dass das Wärme- Kälteband (Fig. 3) (1) mit dem Verschluss (Fig. 3) (16) verschlossen wird.
19. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass einem flexiblen Band (Fig. 4) (1) die Kälte- (Fig. 4) (2) und Wärmeelemente (Fig. 4) (3) eingefügt und in das Schutzgehäuse (Fig. 4) (14) eingebracht sind.
20. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1 und 19 dadurch gekennzeichnet, dass das Niederspannungssteuerungsgerät (Fig. 4) (4) mit dem Ein- und Ausschalter (Fig. 4) (5) und der Intervallsteuerung (Fig. 4) (6) versehen ist.
21. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1,19 und 20 dadurch gekennzeichnet, dass das Niederspannungssteuerungsgerät (Fig. 4) (4) mit den Elektrokabeln (Fig. 4) (7 und 8) und den Wärme-Kälteelementen (Fig. 4) (2 und 3) verbunden ist, wobei sich die wechselelektromechanische Steuerung (Fig. 4) (9) hinter den beiden Wärme-Kälteelementen (Fig. 4) (2 und 3) befindet.



22. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1, 19, 20 und 21 dadurch gekennzeichnet, dass den Wärme-Kälteelementen (Fig. 4) (2 und 3) die Kühlrippen (Fig. 4) (10) vorgelagert sind, verschlossen mit dem Element (Fig. 4) (11), sowie der Feuchtigkeitsspender (Fig. 4) (12) aufgebracht ist.
23. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1, 19 bis 22 dadurch gekennzeichnet, dass das Wärme-Kälteband (Fig. 4) (1) mit einem Klettverschluss (Fig. 4) (13) versehen ist.
24. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach Anspruch 1, 19 - 23 dadurch gekennzeichnet, dass ein Kopfbügel (Fig. 5) (1) versehen mit zwei Muscheln (Fig. 5) (2) verwendet wird.
25. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1, 19 - 24 dadurch gekennzeichnet, dass sich in/ an den beiden Muscheln (Fig. 5) (2) die Wärme-Kälte Peltier-Elemente (Fig. 5) (3) befinden, die durch die Zeitintervallsteuerungsvorrichtung (Fig. 5) (9) der Haut Wärme oder Kälte (Fig. 5) (3) aufbringt.
26. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1, 19 - 25 dadurch gekennzeichnet, dass die Peltier-Elemente (Fig. 5) (3) über den Anschlußdraht (Fig. 5) (13) mit dem Steuerungsgerät für Pumpe und Intervall- und Zeitsteuerung (Fig. 5) (9) verbunden sind, wobei das Steuerungsgerät (Fig. 5) (9) mit einem Ein- und Ausschalter (Fig. 5) (10) versehen ist.

27. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1, 19 - 26 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der Wärmetauscher (Fig. 5) (4) über die Kühlwasserzuleitung (Fig. 5) (7) und die Warmwasserableitung (Fig. 5) (8) mit dem Kühlwasserbehälter mit Kühlwasser (Fig. 5) (5) verbunden ist.
28. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1, 19 - 27 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s mittels der Pumpe (Fig. 5) (6) das Kühlwasser über die Zu- und Ableitungen (Fig. 5) (7 und 8) zu dem Wärmetauscher (4) gebracht wird.
29. Wärme-Kälte Verfahren und Geräte zur Schmerzbehandlung insbesondere von akutem Spannungskopfschmerz und Migräne nach den Ansprüchen 1, 19 - 28 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s dem Wärme-Kälte Pel-  
tier-Element (Fig. 5) (3) die abschließende Platte/ Folie (Fig. 5) (11) hervorge-  
bracht und mit dem Feuchtpender (Fig. 5) (12) versehen ist.

FIG. 1

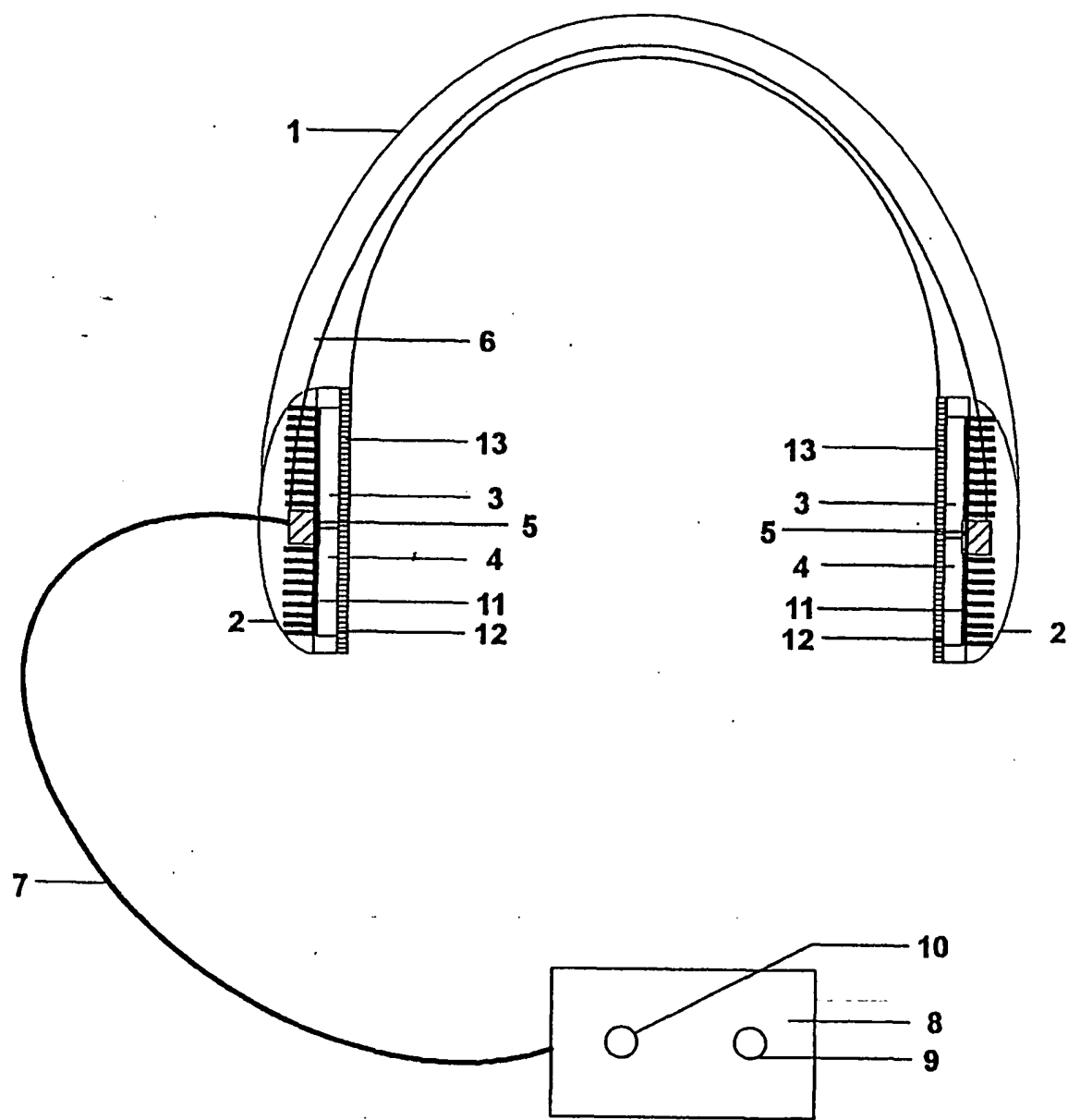


FIG. 2

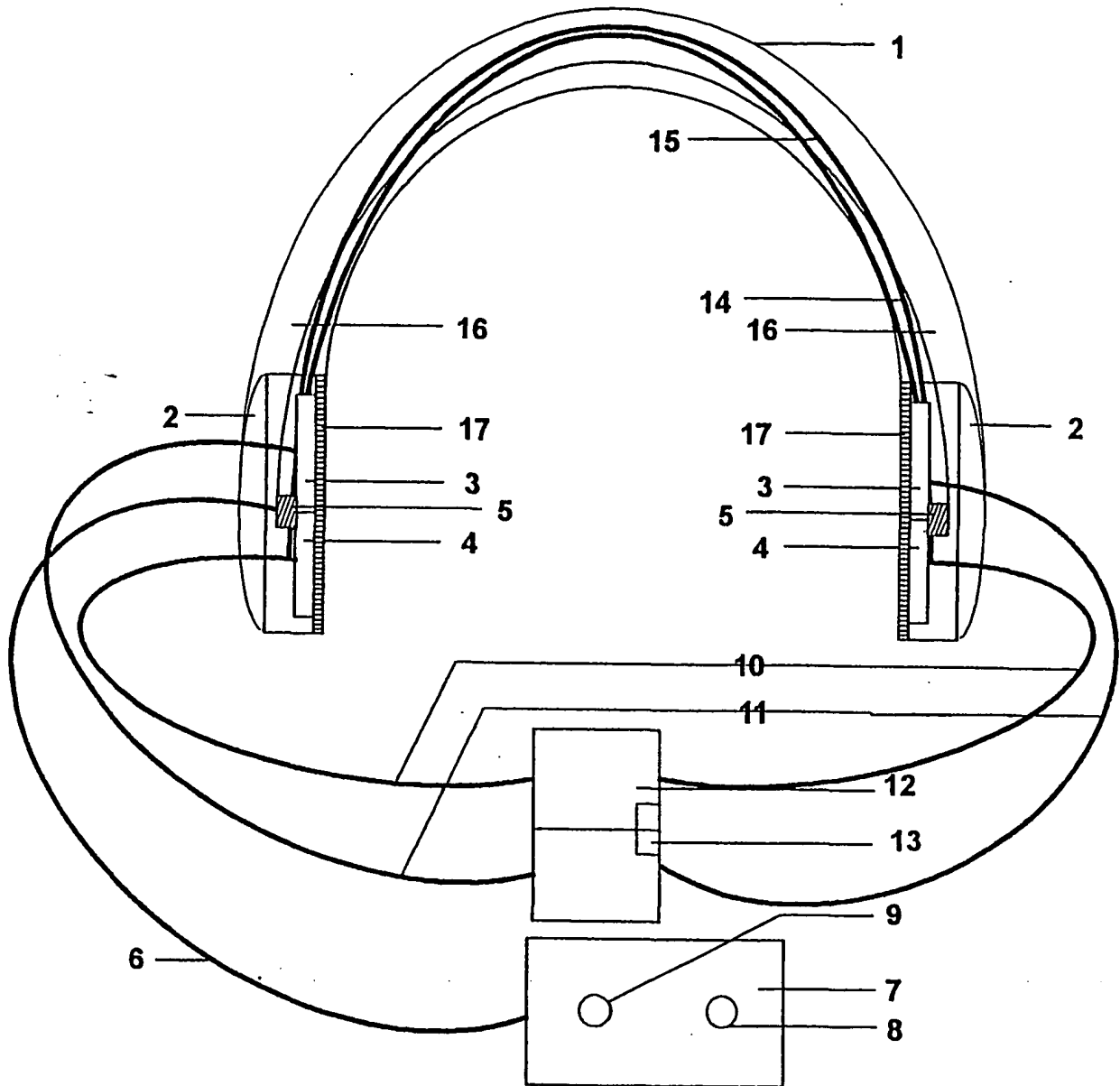


FIG. 3

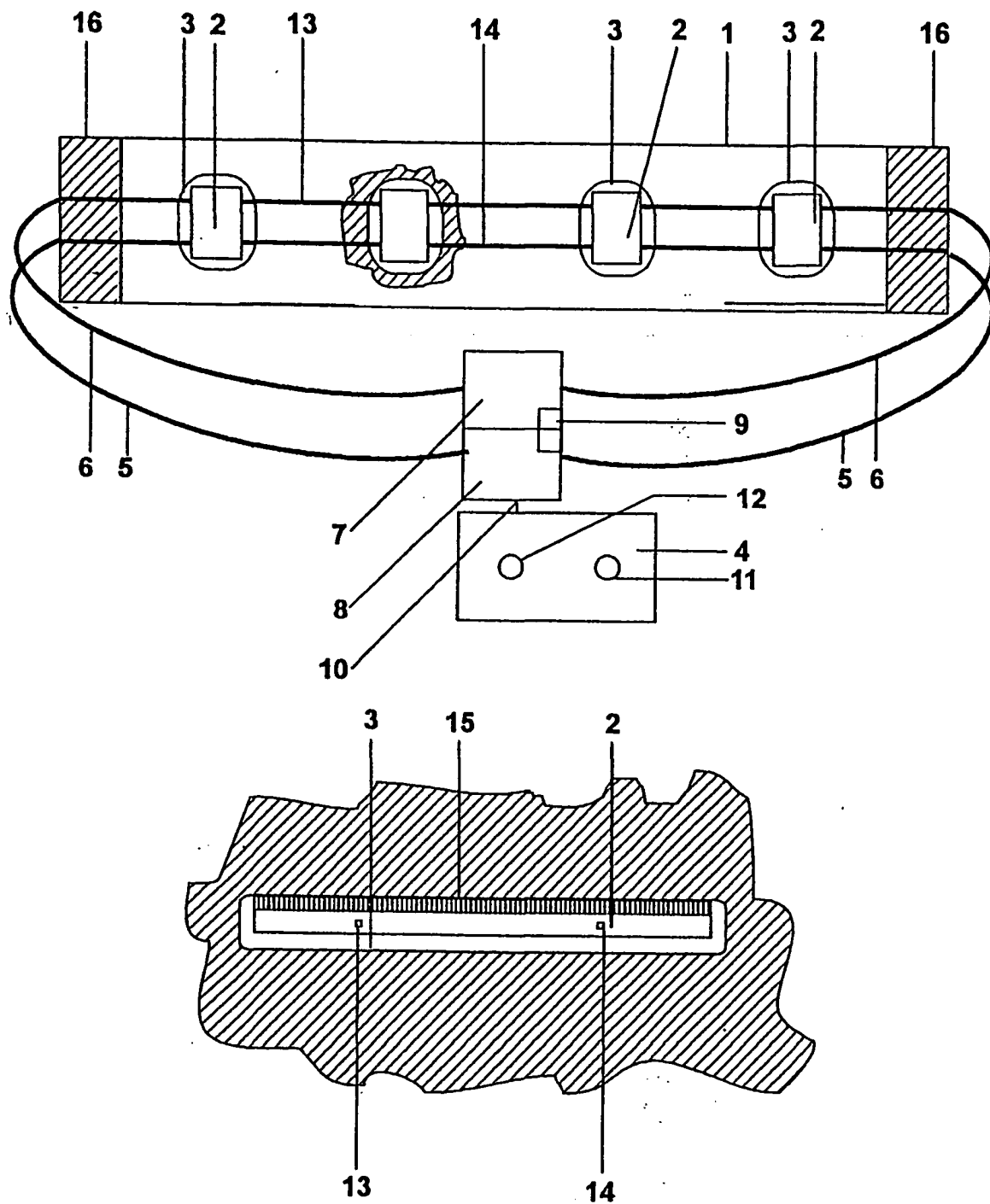


FIG. 4

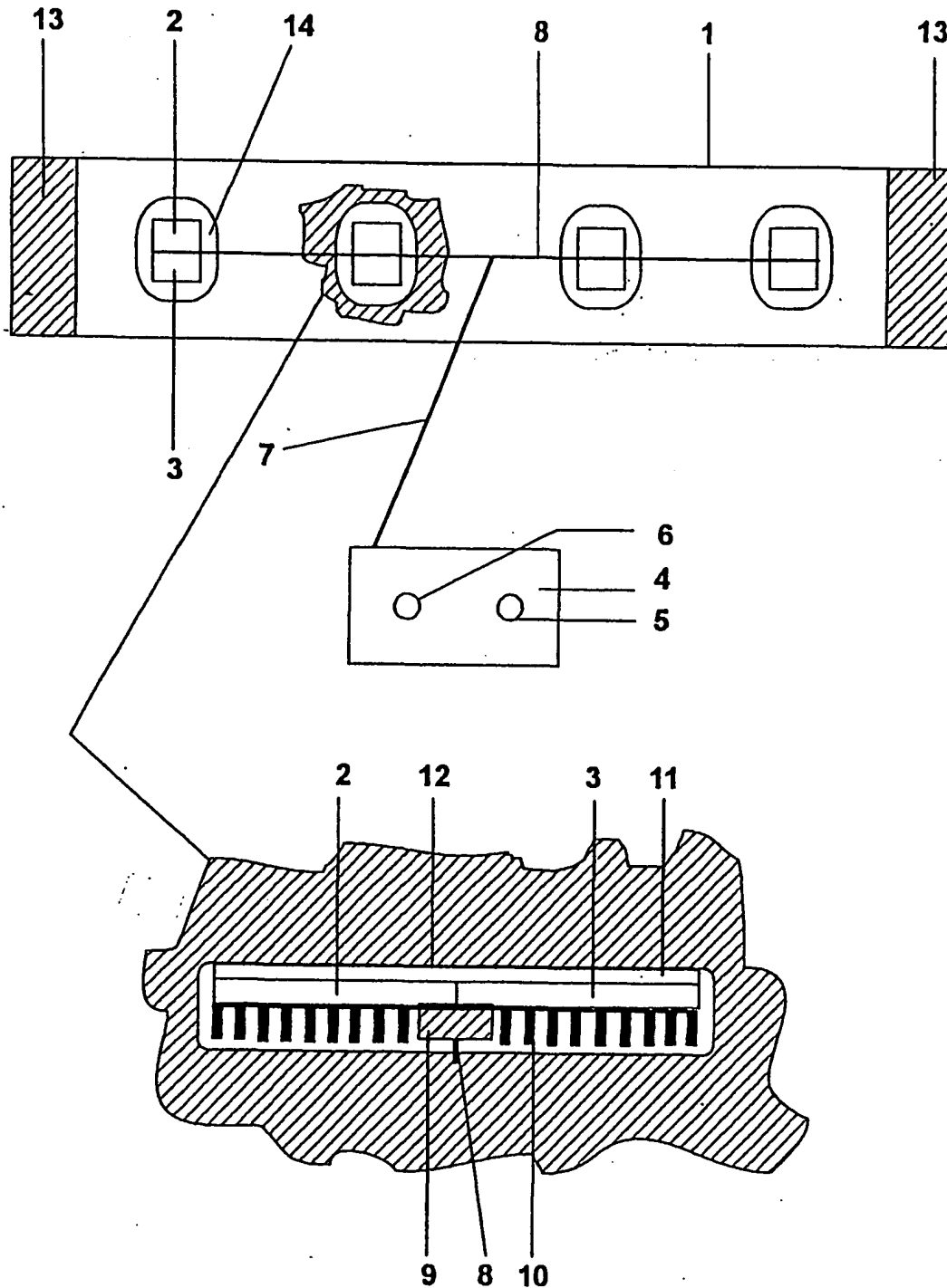


FIG. 5

